


Graviditetstest

Ultratidlig

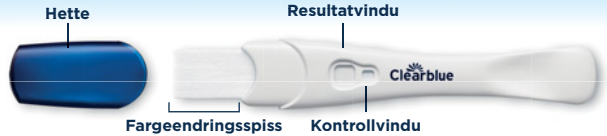

For selvtesting. Les dette pakningsvedlegget nøye før testing.

Test fra **6 dager** før uteblitt menstruasjon!

Hvis du tester tidlig, skal du bruke dagens første urin. Ellers kan du teste når som helst.

Ikke drikk mye væske før du tester.

Les resultatet innen **10 minutter**.



1 Utføre testen

Ta testen ut av folien, ta av hetten og bruk testen med en gang. Plasser fargeendringsspissen:

VIKTIG: senk spissen helt som vist



ned i urinstrømmen din

5 sekunder

eller



i en innsamlet urinprøve

20 sekunder

VIKTIG: Fargeendringsspissen blir umiddelbart rosa for å vise at urinen blir absorbert. Start tidtakingen så snart du ser at fargeendringsspissen blir rosa.

Sett på hetten og legg testpinnen flatt ned. Hvis spissen ikke blir helt rosa, se «Testfeil».

2 Vent



En linje i kontrollvinduet kan raskt begynne å vises, men du må **VENTE 3 HELE MINUTTER** før du leser resultatet. Hvis det ikke vises noen blå linjer, se 'Testfeil'.

3 Resultater

Gravid – kontakt legen din hvis resultatet ditt er at du er gravid.

Bilde A



Resultatvindu

Kontrollvindu

Bilde B



Bilde C



Ikke Gravid (se Q2).



Hvis du er usikker på resultatet, se Q6.

HVIS DU SER TO STREKER ER DU GRAVID. DET SPILLER INGEN ROLLE HVOR SVAKE ELLER MØRKE STREKENE ER. En blå linje må være tilstede i kontrollvinduet for at resultatet ditt skal være gyldig. Hvis ikke, se «Testfeil». **VIKTIG!** Les resultatet ditt senest innen **10 minutter** etter at du har tatt testen. Se bort fra alle endringer etter denne tiden har passert.

? Spørsmål og svar

1 Resultatet mitt er Gravid. Hva bør jeg gjøre?

Kontakt legen din, som vil gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Det er mulig å få et positivt resultat og finne ut senere at du ikke lenger er gravid, se Q7.

2 Resultatet mitt er Ikke Gravid. Hva betyr dette?

Det kan hende at du ikke er gravid, eller nivået av graviditetshormon er for lavt til å registreres. Test igjen om tre dager. Hvis testen viser resultatet Ikke Gravid og menstruasjonen din er sen, må du oppsøke lege.

3 Hvor tidlig kan jeg teste?

Denne testen kan brukes fra seks dager før den uteblitte menstruasjonen din (5 dager før du forventer menstruasjonen). Ettersom hormonnivået varierer fra kvinne til kvinne og kan være veldig lavt tidlig i svangerskapet, er det mulig å være gravid og likevel få et negativt resultat. Diagrammet nedenfor viser prosentandelen graviditeter som ble oppdaget i laboratorietester med urinprøver i tidlig graviditet:

Dager før uteblitt menstruasjon	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Graviditet oppdaget	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

4 Hvordan fungerer Clearblue?

Testen påviser graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin) i urin. Testsensitiviteten er 10 mIU/ml. Laboratorietester har vist 99 % nøyaktighet fra den dagen du forventer menstruasjonen.

5 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?

Les alltid produsentens instruksjoner for alle legemidler du tar før du tar testen. Medisiner som inneholder hCG, og visse sjeldne medisinske tilstander, kan føre til falske positive resultater. Svangerskap utenfor livmoren og nylige graviditeter, selv om ikke hele svangerskapet ble fullført, kan føre til misvisende resultater. Hvis du er i, eller nærmer deg overgangsalderen, kan testresultatet feilaktig bli «Gravid», selv om du ikke er gravid. Testen skal **IKKE** bli påvirket av hormonerterapi som inneholder klomifensitrat, smertestillende tabletter, alkohol, antibiotika eller p-piller.

Dersom resultatet ikke er som forventet bør du rådføre deg med legen din.

6 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?

Hvis du ser to blå linjer innen 10 minutter etter testing, er du gravid. Det spiller ingen rolle hvor svake eller mørke linjene er.

Gravid-resultater

Bilde A Det kan hende du ser dette hvis du tester i dagene rundt den dagen du forventer menstruasjonen din, ettersom hCG-nivåene kan være relativt lave.

Bilde B Det kan hende du ser dette hvis du tester dagen du forventer menstruasjonen din, ettersom hCG-nivåene kan være relativt lave.

Bilde C Det kan hende du ser dette hvis du tester mer enn noen få dager etter uteblitt menstruasjon, ettersom hCG-nivåene er høyere.

Hvis du fortsatt er usikker på resultatet, må du vente i minst tre dager før du tester på nytt. Følg instruksjonene nøye.

7 Jeg har tidligere fått «Gravid»-resultat på testen, men testet igjen og fikk «Ikke gravid»-resultat eller menstruasjonen startet. Hva betyr dette?

Det er mulig å få et positivt resultat og senere finne ut at du ikke lenger er gravid. Dette kalles «tidlig graviditetstap». Det er dessverre ikke uvanlig, og det påvirker rundt 1 av 4 graviditeter. De fleste kvinner kan ha en sunn graviditet etterpå.

8 Er det noe jeg bør gjøre hvis jeg planlegger å bli gravid?

Det er lurt å snakke med legen din før du prøver å bli gravid. Mange leger anbefaler at det kan være gunstig å ta folsyre eller vitamintilskudd under svangerskapet, unngå alkohol, slutte å røyke og å prøve å opprettholde en sunn vekt. Det kan også være lurt å vurdere å bruke en egglossningstest for å identifisere de mest fruktbare dagene. Clearblue tilbyr et utvalg av produkter som er laget for å maksimere sjansene dine for å bli gravid.

! Testfeil

Fargeendringsspissen blir ikke helt rosa.

Du har kanskje ikke påført nok urin. Du kan imidlertid være sikker på at testen har fungert hvis kontrolllinjen vises innen 10 minutter etter testing.

Ingen blå linje vises i kontrollvinduet innen 10 minutter etter testing.

Testen har ikke virket, muligens fordi det ble påført for mye eller for lite urin. Test igjen med en ny test, og følg instruksjonene nøye.

Resultatvindu
Kontrollvindu



www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Samtalen din vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

800 10 218 Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Ha produktet og emballasjen, inkludert eventuelle folieposer, med deg når du ringer.

Instruksjoner for Clearblue Ultratidlig, med «CB14» trykt på innpakningen. Til selvtesting hjemme. Kun til *in vitro*-diagnostisering. Ikke til innvortes bruk. Må ikke brukes om igjen. Oppbevares utlignegelig for barn. Oppbevares mellom 2 og 30 °C. La testen ligge i romtemperatur i 30 minutter før du tester, dersom den oppbevares i kjøleskap. Må ikke brukes dersom foliepakningen er skadet. Må ikke brukes etter holdbarhetsdato. Kast sammen med vanlig husholdningsavfall. Ikke demonter enheten. Inneholder små deler.

Ikke spis noen deler av denne enheten. Kontakt lege dersom svelging skjer ved et uheld. Rapporter eventuelle skader forårsaket av bruken av Clearblue-produktet.

179 % av Gravid-resultater kan oppdages 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før du forventer menstruasjonen).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.

LOT	Partikode	IVD	In vitro-diagnostisk medisinsk produkt	Producent
	Siste forbruksdag	Temperaturgrenser	2-30 °C	Må ikke brukes om igjen

Clearblue er et varemerke for SPD.
© 2021 SPD. Alle rettigheter forbeholdes.

2300438.05 04-2021

