

Ultratidlig AVANSERT Graviditetstest



Til selvtesting. Les bruksanvisningen nøye før du tester.

Dette produktet er en ikke-automatisert selvtestenhet for hjemmebruk for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin fra kvinner for å fastslå graviditet. Beregnet for bruk fra 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før forventet menstruasjon).

Advarsler og forsiktighetsregler

Instruksjoner for enheter med "CB16002" trykt på emballasjen. Til selvtesting i hjemmet. Kun for in vitro-diagnostikk. Ikke til innvortes bruk. Må ikke gjenbrukes. Oppbevares utlignelig for barn. Oppbevares ved 2–30 °C. Hvis produktet har vært oppbevart i kjøleskap, skal det ligge i romtemperatur i 30 minutter før testen utføres. Ikke bruk testen dersom foliepakken er skadet. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Når foliepakken er åpnet, skal testen brukes umiddelbart. Kastes som vanlig husholdningsavfall. Inneholder små deler. Ikke svelg noen del av enheten. Kontakt lege dersom noen del ved et uhell svelges. Rapporter enhver personskaade forårsaket av bruk av dette produktet til Clearblue og relevant myndighet i medlemsstaten.



Test fra
6 dager
før
uteblitt menstruasjon*



med
DualSense-
teknologi



Ikke drikk for
mye væske
før du tar testen



Hvis du tester tidlig,
bør du bruke
dagens første urin
Test ellers når som helst. Se F2

1 Utfør testen

Utstyr som er nødvendig, men som ikke følger med: En ren og tørr beholder og et stoppeklokke. Fjern folien, ta av hetten og bruk testen umiddelbart. Hold den absorberende spissen nedover og plasser kun spissen **enten** i:

urinstrålen



eller

en oppsamlet urinprøve



VIKTIG!

Senk
spissen helt
ned, som vist
på bildet

Sett hetten på igjen og legg testen på en flat overflate.

2 Vent



Røde linjer begynner å vises. Hvis ingenting skjer, les avsnittet "Testfeil".

Vent i 5 HELE MINUTTER før du leser av resultatet.

3 Resultat

Gravid

Se F4 for mer informasjon.




Hvis du ser to linjer, betyr det at du er gravid.
Det har ingen betydning hvor lyse eller mørke linjene er.

Det må vises en rød linje i kontrollvinduet for at resultatet skal være gyldig. Hvis ingenting skjer, les avsnittet "Testfeil". **VIKTIG!** Les av resultatet innen 10 minutter etter testing. Se bort fra eventuelle endringer etter dette tidspunktet.

Ikke gravid

Se F5 for mer informasjon.

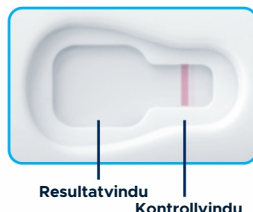



Spørsmål og svar

1 Hvor pålitelig er Clearblue?

Ultratidlig AVANSERT graviditetstest er over 99 % pålitelig i laboratorietester fra dagen du forventer menstruasjon.

2 Hvilket tidspunkt på dagen kan jeg teste?

Hvis du tester før du skal ha menstruasjon, bør du alltid bruke dagens første urin, siden graviditetshormonene er mer konsentrerte da. Hvis du tester fra den dagen du skal ha menstruasjon, vil hormonnivåene være høyere hvis du er gravid. Da kan du teste med urin tatt når som helst i løpet av dagen.

3 Hvor tidlig kan jeg teste?

Denne testen kan brukes fra 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før forventet menstruasjon).*

Siden hormonnivåene varierer fra kvinne til kvinne og kan være svært lave tidlig i graviditeten, kan du likevel være gravid og få et negativt resultat.

Diagrammet nedenfor viser andelen graviditeter som er påvist i laboratorietesting av tidlige urinprøver fra gravide kvinner:

Dager før uteblitt menstruasjon	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Påviste graviditeter	> 99 %	> 99 %	> 99 %	98 %	93 %	77 %

4 Resultatet mitt er Gravid. Hva skal jeg gjøre nå?

Kontakt lege for råd om hva du bør gjøre videre. Det er mulig å få et positivt resultat og senere finne ut at du ikke lenger er gravid.

5 Resultatet mitt er Ikke gravid. Hva betyr det?

Du er kanskje ikke gravid, eller graviditetshormonet er ennå ikke i høy nok konsentrasjon til å bli påvist.

Hvis du testet tidlig (før forventet menstruasjon), bør du teste igjen når det er tid for menstruasjonen.

Kontakt legen din hvis du får et negativt graviditetstestresultat på eller etter dagen du skal ha menstruasjon, men fortsatt tror at du kan være gravid.

6 Hvordan fungerer DualSense-teknologien?

Selv om hCG er kjent som "graviditetshormonet", kan lave nivåer av hCG forekomme i urinen hos et svært lite antall kvinner uten at de er gravide (vanligvis kvinner nær eller i overgangsalderen). Dette innebærer at det kan være en svært liten risiko for at disse kvinnene får falskt positive resultater ved bruk av graviditetstester med høy følsomhet, det vil si tester som kan brukes svært tidlig, ettersom de er utviklet for å påvise lave nivåer av hCG.

Forskning viser imidlertid at disse kvinnene også kan ha høye nivåer av tilknyttet FSH (follikkelstimulerende hormon). Clearblues DualSense-teknologi er et unikt system som registrerer hCG når det forekommer høye nivåer av FSH i urinen, og er utviklet for å bidra til å redusere risikoen for falskt positive resultater i denne gruppen av kvinner.

7 Kan resultatet påvirkes av legemidler eller medisinske tilstander?

Les alltid produsentens anvisninger for eventuelle legemidler du bruker før du tester. Hvis du får uventede resultater, bør du rådføre deg med legen din.

Legemidler som inneholder hCG eller FSH, samt andre hormonbehandlinger, kan påvirke resultatet. Ved graviditet utenfor livmoren eller hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ikke ble fullført), kan du få misvisende resultater.

Testen påvirkes normalt IKKE av hormonbehandlinger som inneholder klomifensitrat, eller av vanlige smertestillende midler, alkohol, antibiotika eller p-piller.

8 Er det noe jeg bør gjøre hvis jeg planlegger å bli gravid?

Det er en god idé å snakke med legen din før du prøver å bli gravid. Mange leger anbefaler å ta folsyre eller vitamintilskudd, unngå alkohol, slutte å røyke og forsøke å opprettholde en sunn vekt. Du kan også vurdere å bruke en egglesningstest for å identifisere dine mest fertile dager.

Clearblue tilbyr et sortiment som kan hjelpe deg med å maksimere sjansene dine for å bli gravid.



Testfeil

Det vises ingen rød linje i kontrollvinduet innen 10 minutter etter at du har utført testen.

Testen har ikke fungert, muligens fordi det er brukt for mye eller for lite urin. Test på nytt med en ny test, og følg instruksjonene nøye.



Resultatvindu

Kontrollvindu



Ytelsesegenskaper

Klinisk ytelse:

Kliniske ytelsestester har vist at enheten er > 99 % pålitelig når det gjelder fastsettelse av graviditetsstatus fra dagen menstruasjonen er forventet.

- Enheten var > 99 % pålitelig når den ble brukt av lekfolk, sammenlignet med deres graviditetsstatus (testet av 302 kvinner).
- Ved laboratorietesting av 708 prøver var enheten > 99 % pålitelig fra dagen for forventet menstruasjon.
- Klinisk spesifisitetstesting av prøver fra kvinner før, under og etter overgangsalderen (501 prøver) bekreftet ≥ 99 % spesifisitet.

Analytisk ytelse:

Analytisk spesifisitet ble fastsatt ved å teste enheten med potensielt interfererende eller kryssreagerende stoffer. Resultatene bekreftet at høye konsentrasjoner av disse ikke påvirker enhetens ytelse. Enheten påvirkes heller ikke av høye nivåer av hCG-bekreftelsesfragmenter, svært høye nivåer av intakt hCG, en rekke spesifikke densiteter eller urinens pH. En presisjonsstudie har vist at enhetens analytiske sensitivitet er 10 mIU/mL.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.
Clearblue er et varemerke som tilhører SPD.
© 2025 SPD. Alle rettigheter forbeholdt.



www.clearblue.com

Produktrådgivning er tilgjengelig mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 12.00. Det er ikke alltid mulig å snakke med en norsk rådgiver, og samtalen din kan derfor bli besvart på engelsk.

800 10 218 Samtalen er gratis.

Alle samtaler blir tatt opp og kan overvåkes for kvalitetsformål. Vennst ha produktet og hele emballasjen, inkludert folieomslagene, tilgjengelig når du ringer

IVD	Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk	LOT	Partikode
	Produsent		Utløpsdato
	Må ikke gjenbrukes		Temperaturgrense 2-30 °C
EU REP	Autorisert representant i Den europeiske union		

Litteratur

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156-60.
 2. Gnath C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7): 661-669.
 3. Gronowski A, et al. Clin Chem 2008; 54: 652-656
- *77 % av alle graviditeter kan påvises 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før forventet menstruasjon).

